

CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

QUICK REFERENCE GUIDE

IMPORTANT

- This test can be used within the first ten days that symptoms appear for COVID-19.
- This test is approved for use at home by individuals aged 12 years or older. Nasal swab samples from individuals aged below 12 years or above 70 years should be collected by or under supervision of adults.
- The test will take approximately 5 minutes to setup and the test results must be read at 15 minutes.
- It is important that you carefully follow the instructions to achieve the correct result.
- The test device and the buffer solution must be at room temperature (15-30°C) before starting the test.
- Please wash or sanitize your hands before and after the test.
- Please take required safety measures when testing other people (e.g. face mask, gloves).

If you have questions about using the test or reading the results, please call customer care.

Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com


GETTING STARTED

Kit Contents

1. Sterile Swabs (5)
2. Test Devices (5)
3. Extraction Tubes with Buffer and Tips (5)
4. Instructions For Use (1)
5. Quick Reference Guide (1)

ITEMS REQUIRED BUT NOT PROVIDED


Clock, timer or stopwatch and plastic bag for waste.

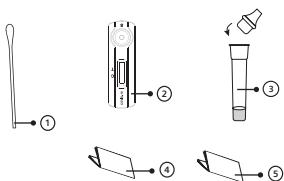

INDEX OF SYMBOLS

	Consult instructions for use		Tests per kit		Authorized Representative
	For in vitro diagnostic use only		Use by		Do not reuse
	Store between 2-30°C		Lot Number		Catalog #


TEST PROCEDURE

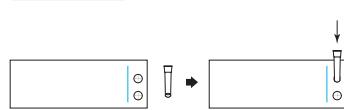

Step 1.
Insert the tube into the workstation. Remove the lid from the top of the tube.




Step 4.
Roll the swab at least 5 times against the insides of your nostril. Ensure good contact between the swab and the insides of your nostril.

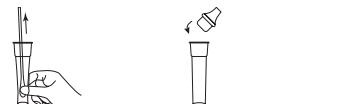

Step 5.
Remove the swab and insert into your right nostril. Repeat Steps 3 and 4.




Step 10.
Remove the swab and discard in a plastic bag.

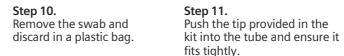


Step 11.
Push the tip provided in the kit into the tube and ensure it fits tightly.

Step 15.
Read your results. There are three possible types of results.

Positive Test Result

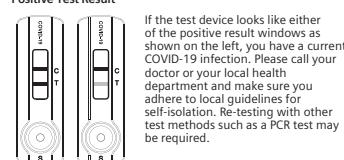

If the test device looks like either of the positive result windows as shown on the left, you have a current COVID-19 infection. Please call your doctor or your local health department and make sure you adhere to local guidelines for self-isolation. Re-testing with other test methods such as a PCR test may be required.

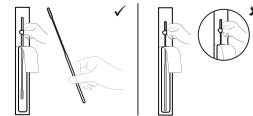

Step 2.
Open the swab package where indicated. Pull the swab out by grasping the plastic end. Do not touch the absorbent swab tip.



Step 6.
Remove the swab from your nostril and insert the swab into the prepared tube in the workstation.



Step 7.
Mix well by rolling the swab at least 6 times while pressing the head of the swab against the bottom and sides of the tube.



Step 13.
Remove the test device from the pouch and lay it on a flat clean surface.



Step 14.
Add 4 drops of the solution into the sample well of the test device by gently squeezing the tube.



Step 3.
Carefully insert the absorbent tip of the swab into your left nostril. Ensure that the entire swab tip is inside your nostril (2-4 cm deep). Do not insert the swab further after you feel resistance.




Step 8.
Start timer. Leave the swab in the tube for 1 minute.



Step 9.
Squeeze here 4 drops of solution
1 Minute
15 Minutes



Step 14.
Start timer and read results at 15 minutes. It is important to read the results at 15 minutes.

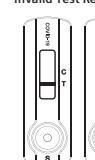

If your test result looks different, meaning there is no line visible or only one line at T, the result is invalid. This may be a result of the test execution, and the test should be repeated. If invalid test results continue, please contact your doctor or a COVID test center.

CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

IMPORTANTE

- Esta prueba se puede utilizar durante los diez días posteriores a la aparición de los síntomas de COVID-19.
- Esta prueba está aprobada para su uso casero por parte de personas de más de 12 años. La recogida de muestras de hisopado nasal de personas de menos de 12 años o de más de 70 debe estar a cargo de adultos o supervisada por adultos.
- La preparación de la prueba tomará aproximadamente 5 minutos y los resultados deben leerse a los 15 minutos.
- Es importante seguir atentamente las instrucciones para obtener el resultado correcto.
- El dispositivo de prueba y la solución tampón deben estar a temperatura ambiente (15–30°C) antes de iniciar la prueba.
- Antes y después de realizar la prueba, lávese las manos o desinfectelas.
- Tome las medidas de seguridad necesarias al realizar pruebas en otras personas (p. ej., mascarilla, guantes).

Si tiene preguntas sobre el uso de la prueba o sobre la lectura de los resultados, llame al servicio de atención al cliente.
Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com


PRIMEROS PASOS

Contenido del kit

1. Hisopos estériles (5)
2. Dispositivos de prueba (5)
3. Tubos de extracción con solución tampón y puntas (5)
4. Instrucciones de uso (1)
5. Guía de consulta rápida (1)

ARTÍCULOS REQUERIDOS PERO NO SUMINISTRADOS


Reloj, temporizador o cronómetro y bolsa de plástico para residuos.

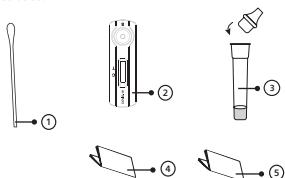

ÍNDICE DE SÍMBOLOS

	Consultar las instrucciones de uso		Pruebas por kit		Representante autorizado
	Para uso exclusivo de diagnóstico in vitro		Fecha de caducidad		No reutilizar
	Almacenar entre 2–30°C		Número de lote		N.º de catálogo


PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

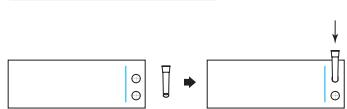

Paso 1.
Introduzca el tubo en la estación de trabajo. Quite la tapa de la parte superior del tubo.




Paso 4.
Gire el hisopo al menos 5 veces mientras lo presiona contra la parte interna de la nariz. Asegúrese de que se produzca un buen contacto entre el hisopo y la parte interna de la narina.

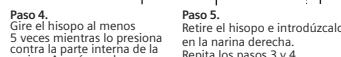

Paso 5.
Retire el hisopo e introduzcalo en la narina derecha. Repita los pasos 3 y 4.



Paso 10.
Retire el hisopo y deséchelo en una bolsa de plástico.


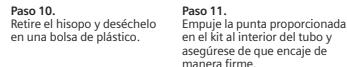


Paso 11.
Empuje la punta proporcionada en el kit al interior del tubo y asegúrese de que encaje de manera firme.

Paso 15.
Lea los resultados. Existen tres tipos de resultados posibles.

Resultado positivo de la prueba

Si el dispositivo de prueba tiene el aspecto de cualquiera de las ventanas de resultado positivo que se muestran a la izquierda, actualmente está infectado por COVID-19. Llame al médico o al Ministerio de Sanidad local y asegúrese de cumplir todas las directrices para el autoaislamiento. Puede ser necesario repetir la prueba con otros métodos, como la prueba de PCR.

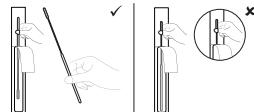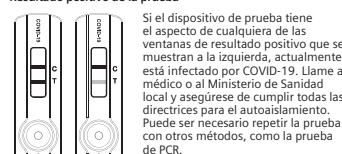

Paso 2.
Abra el paquete de hisopos por la marca. Extraiga el hisopo sosteniéndolo por el extremo de plástico. No toque la punta absorbente del hisopo.




Paso 6.
Retire el hisopo de la narina e introduzcalo en el tubo preparado que se encuentra en la estación de trabajo.



Paso 7.
Mezcle bien girando el hisopo al menos 6 veces mientras presiona el cabezal contra el fondo y los laterales del tubo.

Vierta aquí 4 gotas de solución de prueba

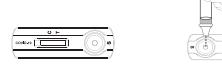

Paso 12.
Retire el dispositivo de prueba de la bolsa y apóyelo sobre una superficie plana limpia.



Paso 13.
Añada 4 gotas de la solución en el pocillo de muestra del dispositivo de prueba apretando suavemente el tubo.



Paso 3.
Con cuidado, introduzca la punta absorbente del hisopo en la narina izquierda. Asegúrese de que toda la punta del hisopo esté dentro de la narina (2–4 cm de profundidad). No intente insertar más el hisopo tras sentir resistencia.



Paso 8.
Inicie el temporizador. Deje el hisopo en el tubo durante 1 minuto.





Paso 14.
Inicie el temporizador y lea los resultados tras 15 minutos. Es importante leer los resultados a los 15 minutos.



Resultado negativo de la prueba

Si el dispositivo de prueba tiene el aspecto de la ventana de resultado negativo que se muestra a la izquierda, no se ha detectado infección por COVID-19. Ante un presunto caso, repita la prueba tras 1–2 días, ya que el virus no puede detectarse con precisión en todas las fases de la infección. A pesar de haber obtenido un resultado negativo, debe cumplir todas las reglas pertinentes al contacto con otras personas y a las medidas preventivas.

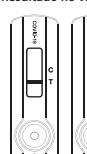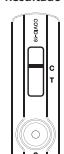

Resultado no válido de la prueba

Si el resultado de la prueba tiene un aspecto diferente; es decir, si no hay una línea visible o una sola línea en la zona de T, el resultado es no válido. Esto puede deberse a la realización de la prueba y esta debe repetirse. Si continúa obteniendo resultados no válidos, póngase en contacto con el médico o con un centro de pruebas de COVID.



Healgen Scientific Limited Liability Company
Dirección: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848
Página web: www.healgen.com

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Dirección: Eiffelstrasse 80, 20357 Hamburg, Alemania
REF GCCOV-502a-H5
(11556329)



Fecha de revisión: 2021-05-20
B22214-01
Rev. A

CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

HURTIG REFERENCevejledning

Vigtigt

- Denne test kan bruges inden for de første ti dage, hvor symptomerne på COVID-19 viser sig.
- Denne test er godkendt til hjemmebrug af personer i alderen 12 år eller derover. Prøver fra næsepodninger fra personer under 12 år eller over 70 år skal insamles af eller under opsyn af voksne.
- Det tager cirka 5 minutter at konfigurere testen, og testresultatet skal læses efter 15 minutter.
- Det er vigtigt, at du følger instruktionerne nøje for at opnå det korrekte resultat.
- Testenheden og bufferoplosningen skal have stuetemperatur (15–30°C), før testen påbegyndes.
- Vask ellerrens dine hænder før og efter testen.
- Træf de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, når du tester andre personer (f.eks. ansigtsmaske, handsker).

Hvis du har spørgsmål om brug af testen eller aflæsning af resultater, bedes du kontakte kundeservice.

Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

INTRODUKTION


Sættes in i hold

- Stille pødepinde (5)
- Testenhed (5)
- Ekstraktionsrør med buffer og spidsen (5)
- Brugsanvisning (1)
- Hurtig referencevejledning (1)


NØDVENDIGE MATERIALE, DER IKKE MEDFOLGER

Ur, timer eller stopur samt en plastpose til affald.

TESTPROCEDURE

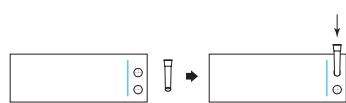


Trin 2.

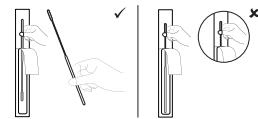

Trin 3.



Trin 4.

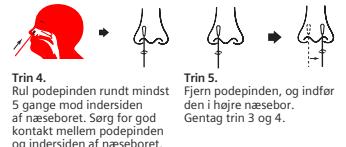

Trin 4.



Trin 5.



Trin 6.



Trin 7.



Trin 8.



Trin 9.



Trin 10.
Aflæs dine resultater. Der er tre mulige typer resultater.

Positiv testresultat



Trin 11.

Trin 12.
Tag testenheden ud af posen, og læg den på en plan, ren overflade.


Trin 12.

Tilsæt 4 dråber af oplosningen i prøvebrønen på testenheden ved at klemme forsigtigt på røret.




Trin 14.
Start timeren, og aflæs resultatet efter 15 minutter. Det er vigtigt at aflæse resultaterne efter 15 minutter.

Negativt testresultat

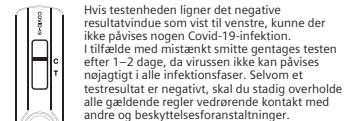

Trin 13.

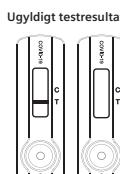

Trin 14.

SYMBOLOVERSIGT

	Se brugsanvisningen		Tests pr. set		Autoriseret repræsentant
	Kun til in vitro-diagnostisk brug		Anvendes senest		Må ikke genbruges
	Opbevares ved 2–30°C		Lotnummer		Katalognummer
					Producent

Healgen Scientific Limited Liability Company
Adresse: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tlf.: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848
Website: www.healgen.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland
 GCCOV-502a-H5
(11556329)



Revisionsdato: 2021-05-20
B22214-01
Rev. A



CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

SNABBGUIDE

VIKTIGT

- Den här analysen kan användas inom de första tio dagarna som symptom på COVID-19 uppträder.
- Den här analysen är godkänd för användning i hemmet av personer som är 12 år eller äldre. Näsavbärsprover från individer under 12 år eller över 70 år bör samlas in av eller under övervakning av vuxna.
- Anlysen tar cirka 5 minuter att utföra och analysresultaten måste läsas av efter 15 minuter.
- Det är viktigt att du följer instruktionerna noggrant för att få ett korrekt resultat.
- Analysen och bufferlösningen måste ha uppnått rumstemperatur (15–30°C) innan analysen påbörjas.
- Tvätta eller desinficera händerna före och efter analysen.
- Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du testar andra personer (t.ex. ansiktsmask, handskar).

Om du har frågor om hur du använder analysen eller läser av resultaten, ring vår kundtjänst.

Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

KOMMA IGÅNG


Satsens innehåll

1. Sterila svabbar (5)
2. Analysenheter (5)
3. Extraktionsrör med buffert och spetsar (5)
4. Bruksanvisning (1)
5. Snabbguide (1)

MATERIAL SOM BEHÖVS MEN INTE INGÅR

Klocka, timer eller tidtagarur och en plastpåse för avfall.


ANALYSMETOD

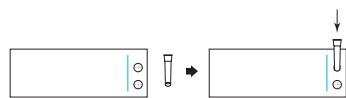

Steg 2. Öppna svabppaketet där det ånges. Dra ut svabben genom att ta tag i plasten. Vidrör inte den absorberande svabspetsen.



Steg 5. Avlägsna svabben och för i den i din högra näsborre. Upprepa steg 3 och 4.


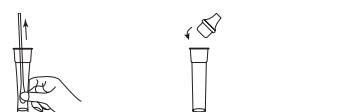


Steg 11. Tryck in spetsen i kitet i röret och se till att den sitter ordentligt.

Steg 15. Läs av dina resultat. Det finns tre möjliga resultattyper.

Positivt analysresultat

Om analysenheten ser ut som något av de positiva resultatfönstren som visas till vänster har du en pågående COVID-19-infektion. Ring din läkare eller din lokala vårdnärmätning och se till att följa lokala riktlinjer för självisolering. Upprepad analys med andra analysmetoder, t.ex. ett PCR-test, kan krävas.

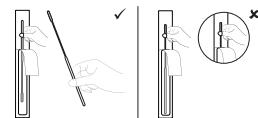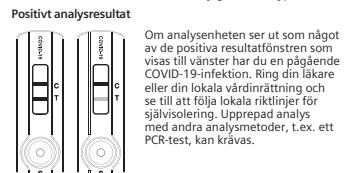


Steg 7. Blanda noggrant genom att rulla svabben minst 6 gånger och samtidigt trycka dess huvud mot rörets botten och sidor.



Steg 14. Starta timern och läs av resultaten efter 15 minuter. Det är viktigt att resultaten läses av efter 15 minuter.


Negativt analysresultat

Om analysenheten ser ut som det negativa resultatfönstret som visas till vänster kunde ingen COVID-19-infektion upptäckas. I mistänkt fall, upprepa analysen efter 1–2 dagar eftersom viruset inte kan upptäckas korrekt under alla faser av en infektion. Även om ditt analysresultat är negativt måste du fortfarande följa alla tillämpliga regler för kontakt med andra och tillämpliga skyddsåtgärder.

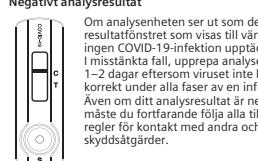

Ogiligt analysresultat

Om ditt analysresultat ser annorlunda ut, dvs. att det inte finns någon synlig linje eller bara en linje vid T, är resultatet ogiltigt. Detta kan bero på analysens genomförande och analysen bör upprepas. Om ogligita analysresultat fortsätter att uppstå, kontakta din läkare eller ett COVID-testcenter.

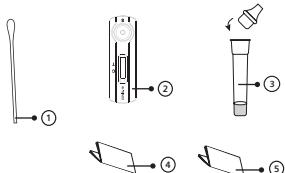

SYMBOLER

	Läs bruksanvisningen		Analys per kit		Autoriserad representant
	Endast för in vitro-diagnostisk användning		Använd före		Får ej återanvändas
	Förvaras mellan 2–30°C		Lotnummer		Katalognr
					Tillverkare

Healgen Scientific Limited Liability Company
Adress: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848
Webbplats: www.healgen.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adress: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland

GCCOV-502a-H5
(11556329)



Revisionsdatum: 2021-05-20
B22214-01
Rev. A

CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

HURTIGREFERANSE

VIKTIG

- Denne testen kan brukes innen de ti første dagene etter at det er oppstått symptomer på COVID-19.
- Denne testen er godkjent for hjemmebruk av personer fra 12 år. Neseprøver fra personer under 12 år eller over 70 år bør tas av eller under tilsyn av voksne.
- Testen vil ta ca. 5 minutter å sette opp, og testresultatene må leses etter 15 minutter.
- Det er viktig at du følger instruksjonene omhyggelig for å oppnå riktig resultat.
- Testenheten og bufferlosningen må være ved romtemperatur (15–30°C) før du starter testen.
- Vask øyer og spirit hendene før og etter testen.
- Treff nødvendige sikkerhetsstikker til ved testing av andre personer (f.eks. munnbind, hanske).

Kontakt kundeservice hvis du har spørsmål om bruk av testen eller lesing av resultatene.

Internett: www.clinitest.siemens-healthineers.com

KOMME I GANG


Innhold i pakken

- Sterile vattipinner (5)
- Testenheter (5)
- Ekstraksjonsrør med buffer og spisser (5)
- Bruksanvisning (1)
- Hurtigreferanse (1)

NØDVENDIG UTSTYR SOM IKKE MEDFØLGER

Klokke, tidtaker eller stoppekklokke og plastpose for avfall.

TESTPROSEDRE

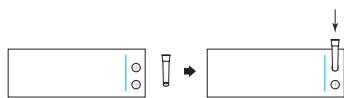

Trinn 1.
Sett røret inn i arbeidsstasjonen. Fjern lokket fra toppen av røret.



Trinn 4.
Rull vattipinnen minst 5 ganger mot innside av neseboret. Sikre god kontakt mellom vattipinnen og inniden av neseboret.



Trinn 5.
Fjern vattipinnen, og før den inn i høyre nesebor. Gjenta trinn 3 og 4.




Trinn 10.
Fjern vattipinnen, og kast i en plastpose.




Trinn 11.
Skyv den medfølgende spissen i settet inn i røret, og kontroller at den passer godt.

Trinn 15.
Les resultatene. Det er tre mulige typer resultater.

Positivt testresultat

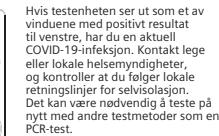

Hvis testenheten ser ut som et av vinduene med positivt resultat til venstre, har du en aktuell COVID-19-infeksjon. Kontakt lege eller lokale helsemyndigheter, og kontroller at du følger lokale retningslinjer for selvisolasjon. Det kan være nødvendig å teste på nytt med andre testmetoder som en PCR-test.

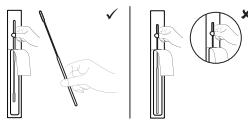

Trinn 2.
Åpne vattipinnekoppen der det er angitt. Trekk ut vattipinen ved å gripe plastenden. Ikke ta på den absorberende spissen på vattipinen.



Trinn 6.
Fjern vattipinnen fra neseboret, og før den inn i røret på arbeidsstasjonen.



Trinn 7.
Bland godt ved å rulle vattipinnen minst 6 ganger mens du presser hodet på vattipinnen mot bunnen og siden av røret.

Klem her 4 dråper løsning



Trinn 13.
Tilsett 4 dråper løsning i prøvebronnen ved å klemme røret forsiktig.



Trinn 3.
Før den absorberende spissen på vattipinen forsiktig inn i venstre nesebor. Kontroller at hele spissen på vattipinen er inne i neseboret (2–4 cm dypt). Ikke for vattipinen lengre inn etter at du har kjent motstand.




Trinn 8.
Start tidtaker. La vattipinnen stå i røret i 1 minutt.



Trinn 9.
Klem røret flere ganger fra utsiden. Prov å løse opp så mye løsning fra vattipinen som mulig.



Trinn 14.
Start tidtakeren, og les resultatene etter 15 minutter. Det er viktig å lese resultatene etter 15 minutter.

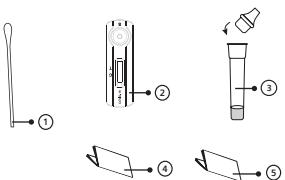


SYMBOLFORKLARING

	Se brukerveiledningen		Tester per sett		Autorisert representant
	Kun til in vitro-diagnostisk bruk		Brukes innen		Ikke til sjøfart
	Oppbevares ved 2–30°C		Lotnummer		Katalognr.
					Produsent

Healgen Scientific Limited Liability Company
Adresse: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tlf.: +1 713-733-8088 Faks: +1 713-733-8848
Nettside: www.healgen.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Adresse: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland
 GCCOV-502a-H5
(11556329)

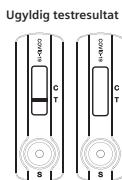

Negativt testresultat

Hvis testenheten ser ut som vinduet med negativt resultat til venstre, kunne det ikke påvises noen COVID-19-infeksjon. I et antatt tilfelle gjentar du testen etter 1–2 dager siden viruset ikke kan påvises nøyaktig i alle fasen av en infeksjon. Tross negativt resultat må du fortsatt følge alle gjeldende regler for kontakt med andre og vernetiltak.



Hvis testresultatet ser annerledes ut, dvs. ingen linje eller bare én linje vises ved T, er resultatet ugyldig. Dette kan skyldes testutstyr. Følg testprosessen og gjenta test. Hvis ugyldige testresultater vedværer, må lege eller et COVID-testcenter kontaktes.

CLINITEST®

Wyrób do samokontroli

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

WAŻNE

- Ten test można wykonywać w ciągu pierwszych dziesięciu dni od wystąpienia objawów choroby COVID-19.
- Ten test jest zatwierdzony do użytku w warunkach domowych przez osobę, która osiągnęła 12. rok życia. Wymazy z noszody osób poniżej 12. roku życia i powyżej 70. roku życia powinny być pobierane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem.
- Przygotowanie testu zajmuje około 5 minut, a wynik testu należy odczytać po 15 minutach.
- Aby uzyskać prawidłowy wynik, istotne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji.
- Przed rozpoczęciem testu należy doprowadzić wyrób do testowania i roztwór buforowy do temperatury pokojowej (15–30°C).
- Przed wykonaniem testu oraz po wykonaniu testu należy umyć lub odkażć ręce.
- W przypadku wykonywania testu innej osobie należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej (np. maseczkę, rękawiczki).

W przypadku pytań dotyczących wykonywania testu lub odczytywania wyników należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Strona internetowa: www.clinitest.siemens-healthineers.com


PIERWSZE KROKI

Zawartość zestawu

- Sterylne wymazówki (5)
- Kasetki testowe (5)
- Probówki do izolacji z buforu i końcówkami (5)
- Instrukcja użytkownika (1)
- Skrócona instrukcja obsługi (1)

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZANE


Zegar, minutnik lub stoper oraz worek z tworzywem sztucznym na odpady.

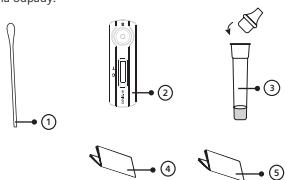

WYKAZ SYMBOLI

	Zapoznać się z instrukcją użytkowania		Liczba testów w zestawie		Autoryzowany przedstawiciel
	Wydzielanie do stosowania w diagnostyce in vitro		Data przydatności do użycia		Nie używać ponownie
	Przechowywać w temperaturze 2–30°C		Numery serii		Numer katalogowy
					Producent

PROCEDURA TESTOWA

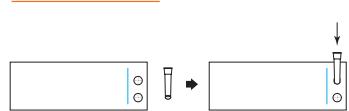

Krok 1.
Włożyć próbówkę do płytki roboczej. Zdejmąć zatyczkę z próbówki.



Krok 4.
Obrócić wymazówkę co najmniej 5 razy, dociskając końcówkę wymazówkę do ścinanki nozdrza.



Krok 5.
Włożyć wymazówkę i włożyć ją do prawańskiego nozdrza. Powtórz kroki 3 i 4.



Krok 10.
Wyciągnąć wymazówkę i wyrzucić ją do worka z tworzywem sztucznego.




Krok 11.
Wcisnąć końcówkę zaklapającą dołączoną do zestawu do próbówki i upewnić się, że jest ona dobrze dopasowana.

Krok 15.
Odczytać wyniki. Istnieją trzy możliwe typy wyników.

Pozytywny wynik testu



Jeśli na kasetce testowej widać jest jedno z przedstawionych po lewej okienku wskazujących na wynik pozytywny, obecne jest aktywne zakażenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19. Należy skontaktować się z lekarzem lub lokalną placówką medyczną i przestrzegać lokalnych zasad dotyczących samoizolacji. Może być konieczne powtórzenie testu innymi metodami, na przykład metodą PCR.

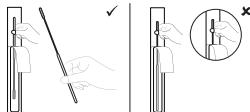

Krok 2.
Otworzyć opakowanie z wymazówką w oznaczonym miejscu. Chwycić wymazówkę za koniec z tworzywa sztucznego i wyciągnąć ją z opakowania. Nie dotykać chłonnej końcówki wymazówki.



Krok 6.
Wyciągnąć wymazówkę z nozdrza i włożyć ją do przygotowanej próbówki w płytkie roboczej.



Krok 7.
W celu dokładnego wymieszania obrócić wymazówkę co najmniej 6 razy, dociskając czubek wymazówki do dna i ścinanki próbówki.

Wycisnąć 4 krople roztworu



Krok 12.
Wyciągnąć kasetkę testową z woreczka i położyć ją na płaskiej, czystej powierzchni.



Krok 3.
Ostrożnie włożyć chłonną końcówkę wymazówki do lewego nozdrza. Upełnić się, że cała końcówka wymazówki znajduje się wewnątrz nozdrza (głębokość 2–4 cm). W przypadku wyciągnięcia oporu nie należy wsuwać wymazówki głębiej.



Krok 8.
Urchomić minutnik. Pozostawić wymazówkę w próbówce na co najmniej 1 minutę.




Krok 9.
Ścisnąć próbówkę kilka razy z zewnątrz. Odcisnąć maksymalną ilość roztworu z wymazówki.




Krok 14.
Urchomić minutnik i odczytać wyniki po upłynięciu 15 minut. Istotne jest, aby odczytać wyniki dokładnie po upłynięciu 15 minut.

Negatywny wynik testu

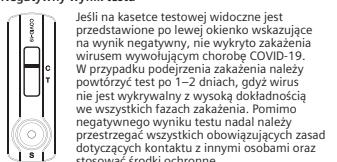

Jeśli na kasetce testowej widać jest przedstawione po lewej okienko wskazujące na wynik negatywny, nie wykryto zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19. W przypadku podejrzenia zakażenia należy powtórzyć test po 1–2 dniach, gdy wirus nie jest wykrywalny z wysoką dokładnością we wszystkich fazach zakażenia. Pomimo negatywnego wyniku testu nadal należy przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad dotyczących kontaktu z innymi osobami oraz stosować środki ochrony.

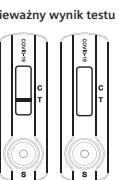

Jeśli wynik testu wygląda inaczej, to znaczy brak jest widocznych linii lub obecna jest tylko jedna linia w obszarze T, wynik jest nieważny. Wynik takiego może być spowodowany błędem podczas wykonania testu. W takim przypadku powtórzyć test. W przypadku otrzymania kolejnego nieważnego wyniku należy skontaktować się z lekarzem lub centrum badań w kierunku COVID.



Healgen Scientific Limited Liability Company
Adres: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel.: +1 713-733-8088 Faks: +1 713-733-8848
Strona internetowa: www.healgen.com

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adres: Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Niemcy
REF GCCOV-502a-H5
(11556329)



Data wydania wersji: 2021-05-20
B22214-01
Wer. A